

親水性ドレッシング

Hydro Colloid Dressing

モイストヒーリング 痛みを緩める 傷の癒合を促進する



3D
多波特許

柔軟な素材 防水で心地良い 特別な設計
効果的に曲面部位に密着できる 傷口を保護する

台湾全新生医股份有限公司 出品

地址：台湾省桃园市杨梅区幼狮工业区青年路六号1楼

电话：+886-3-4642482 传真：+886-3-4641432

电邮：service@igiban.com 网址：www.igiban.com

品質系統
認 證
Certification



厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために
外国製造業者登録証



ヒドロコロイド ドレッシング(包帯)



基本概念:

ヒドロコロイド ドレッシングは新型、無菌の医用ドレッシングで、主として粘着性があった素材、親水性コロイド(CMC)及び弾性をもった人工製フィルムなどから成すものである。

原理:

親水性の高分子粒子は傷の浸出液(体液)と接触して、傷の表面に一層の湿っぽいゲルを形成して、傷の表面のために湿っぽい密閉の癒合環境を提供して、細胞の増殖と上皮細胞の移動を促進して、傷の修復を加速する。

粘着性があった素材はドレッシングの密着特性を保証する。また、ヒドロコロイドはドレッシングの吸収性能の基礎で、弾性をもった人工製フィルムはドレッシングに弾性を与える。


主な性能:

- 1、優秀な吸収力があって、浸出液を吸収できる。
- 2、傷にモイストを維持して、傷の表面への癒合を促進する。痛みを軽減して、換える回数を減らす。
- 3、防水、透気で、外部からの細菌の侵入を防止する。
- 4、良好な弾力性と粘着性をもって、使用の時に心地良く感じる。
- 5、製品の色が変化することによって直ちに替える時機を通知する。
- 6、引き裂きやすく、傷の表面と粘着しない。2回目の損害を起こさなくて、痛みを減らす。
- 7、傷あとの成形を減らす。

主な適応症:

- 1、各々の低度、中度の滲出性傷。
- 2、下肢の静脈うっ滞性潰瘍の予防と治療。
- 3、I-II期の褥瘡の予防と治療。
- 4、小さい面積の軽いやけど。
- 5、手術後の傷。
- 6、皮膚の表層の傷。
- 7、各々の浅い外傷と美容整形の傷。
- 8、慢性的な傷の肉芽成形期と上皮成形期。

モイストヒーリングの三大原則

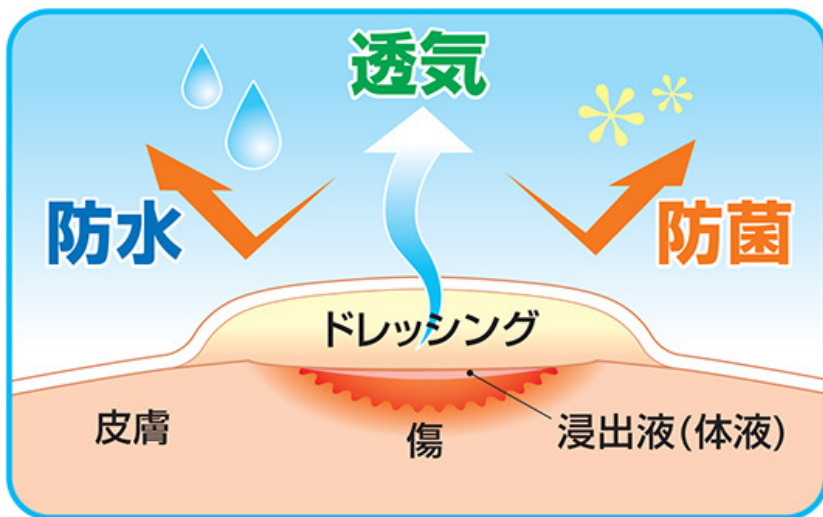


モイストヒーリング(Moist Healing)長所：

- 1 傷の癒合を加速する
- 2 痛みを軽減する
- 3 傷跡が少ない

ドライヒーリング Dry Healing

- 傷は空気と接触して、コットンパッドで傷を覆って、血液を乾燥させてかさぶたを成形する。
- 体液量は減少させて、湿っぽい状態を維持することができなくて、傷の修復のスピードを遅延する。
- 細胞はかさぶたのため、急速に移動して増殖することができないので、傷の表皮化を起す。

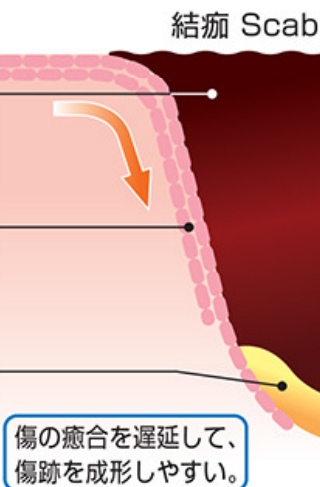

モイストヒーリング Moist Healing

モイストを維持する
Keep moist

- 保湿ドレッシングを覆って、空気を隔離する。それによって、傷に湿っぽい状態を維持させる。
- 効果的に湿っぽい状態を維持して、傷の修復を加速する。
- 体液を維持するため、細胞は急速に移動して細胞の表皮の転換を加速する。

傷の癒合を加快して、成形した傷跡が少ない。

ドライヒーリング/モイストヒーリングの実例の比較



- 適用:** 四肢/彎曲部位/面積が小さい傷
小さい水ぶくれ、軽微な切傷、やけど、レーザーからの傷、進行性指掌角皮症、虫さされ
- 特性:** 透明、防水、一体成形
多波特許の設計、縁が薄くて中央が厚い、密着性がよい、使用の時に心地良くて感じる、落ちにくい




- 製品番号: 3660624
- サイズ: 2×7センチメートル
- 小: 10枚/箱
- 中: 10箱/中箱
- 大: 100箱/件



- 製品番号: 3660631
- サイズ: 3×7センチメートル
- 小: 6枚/箱
- 中: 10箱/中箱
- 大: 100箱/件



- 製品番号: 3660648
- サイズ: 4.5×7センチメートル
- 小: 5枚/箱
- 中: 10箱/中箱
- 大: 100箱/件

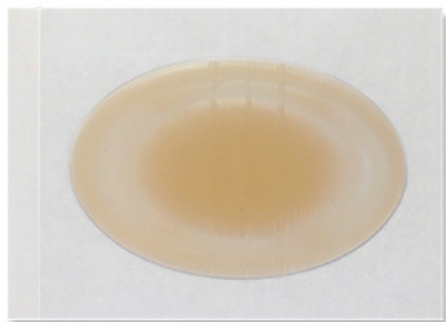

適用: 面積が小さくて浅い傷
爪のへり、ニキビ、レーザー、虫さされ

特性: 透明、防水、一体成形
一手で操作できる設計、特許を取った、縁が薄くて中央が厚い、使用の時に心地良くて感じる、落ちにくい。



- 製品番号: 3660686
- サイズ: 1.2×1.5センチメートル
- 小: 30個/箱
- 中: 15箱/中箱
- 大: 150箱/件



- 製品番号: 3660662
- サイズ: 1.3×1.3センチメートル
- 小: 24個/箱
- 中: 15箱/中箱
- 大: 150箱/件



モイストヒーリングの4ステップ:

1. 洗い:

水で傷を洗い流す。



2. 拭き:

確実に傷を検査して水分を拭く。



3. ドレス:

完全に傷に保湿ドレッシングを覆う。



4. 観察:

傷の癒合の状況を観察する。



適用: 倒れ傷と擦り傷、浅いやけど、浸出液(体液)が比較的に多い傷。

特性: 透明、防水、コロイドは体液を吸収、維持する。



- 製品番号: 3661225
- サイズ: 5x7センチメートル
- 小: 4枚/箱
- 大: 60箱/件



- 製品番号: 3661218
- サイズ: 6X8センチメートル
- 小: 3枚/箱
- 大: 60箱/件



- 製品番号: 3661201
- サイズ: 8X10センチメートル
- 小: 2枚/箱
- 大: 40箱/件





- 製品番号: 3661195
- サイズ: 10X10センチメートル
- 小: 1枚/袋



- 製品番号: 3661188
- サイズ: 5X20センチメートル
- 小: 2枚/袋



- 製品番号: 3661171
- サイズ: 5X10センチメートル
- 小: 3枚/袋



適用: 靴を着る前の予防、摩擦への隔離、硬い皮を軟化する、皮膚の乾燥とひびを予防する。

特性: 透明、防水、一体成形
多波特許、縁が薄くて中央が厚い、使用の時に心地良く感じる、落ちにくい。
長期的に使用すると、角質を軟化して乾燥とひびなどを予防できる。




- 製品番号: 3660150
- サイズ: 2×6センチメートル
- 小: 8枚/箱
- 中: 15箱/中箱
- 大: 150箱/件



- 製品番号: 3660167
- サイズ: 3.6×5.6センチメートル
- 小: 6枚/箱
- 中: 15箱/中箱
- 大: 150箱/件



- 製品番号: 3660204
- サイズ: 3.6×6 センチメートル
- 小: 6枚/箱
- 中: 15箱/中箱
- 大: 150箱/件

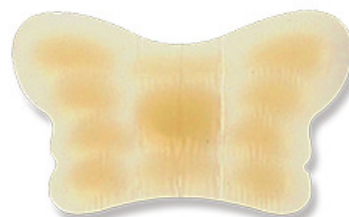

- 製品番号: 3660280
- サイズ: 総合
- 小: 6枚/箱
- 中: 15箱/中箱
- 大: 150箱/件

